Mast Group

OC-SENSOR
FIT-Screening

Darmgesundheit im Blick

Hinweise zur Durchführung

Hinweise zur Durchführung:

- Proberöhrchen nur bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Datum benutzen.
- Vor der Testdurchführung ist keine spezielle Diät erforderlich.
- Bitte keine Probennahme während der Menstruation.
- Probennahme nur einmal durchführen.
- Eine winzige Probenmenge ist ausreichend: Teststab bitte nicht überfüllen und nur einmal in das Proberöhrchen stecken. Nur die Rillen der Spitze müssen mit Stuhlprobe gefüllt sein. Probennahme nicht wiederholen.
- Bitte umgehende Rückgabe der Probe bei Ihrem Arzt nach erfolgter Probennahme; Rückgabe möglichst am Entnahmetag oder am darauffolgenden Tag.

Weitere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Nur zur In-vitro-Diagnostik verwenden.
- Die im Proberöhrchen enthaltene Flüssigkeit nicht ausgießen.
- Kein Wasser zugeben.
- Die Aluminiumdichtung nicht beschädigen.
- Bei Verwendung des Proberöhrchens dieses nicht in direkten Kontakt mit dem Körper bringen.
- Proberöhrchen nur für die Stuhlprobennahme und nicht für andere Zwecke verwenden.
- Proberöhrchen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt der im Proberöhrchen enthaltenen Flüssigkeit mit der Haut, den Augen oder dem Mund vermeiden. Bei Kontakt ausgiebig mit Wasser spülen und ggf. zwecks Behandlung einen Arzt hinzuziehen.

Public / V. 3.0 / 2026-07-01 (de)

IVD CE

EC REP Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

EIKEN CHEMICAL CO., LTD.
4-6 Kandasurugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0062 JAPAN

Vertrieb und Import durch:
Mast Diagnostica GmbH
Feldstraße 20
23858 Reinfeld / Germany
+49 (0)4533 2007 0
fit-info@mast-diagnostica.de
www.mast-group.com

Schrittweise Durchführung

1



Proberöhrchen beschriften:
[N] Vor- und Nachname
[A] Geburtsdatum
[D] Datum der Probennahme

2



Stuhlfänger oder einige Lagen Toilettenpapier als Auffanghilfe in die Toilette legen.

3




Proberöhrchen durch Drehen öffnen und die türkise Kappe samt Teststab herausziehen.

4




Mit der Spitze des Teststabs an verschiedenen Stellen über die Stuhlprobe streichen.

5

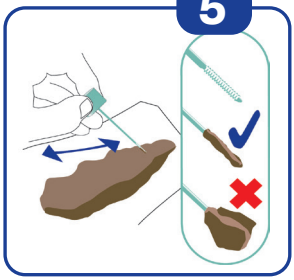


Teststab nicht überfüllen. Nur die Rillen der Spitze müssen mit Stuhlprobe gefüllt sein.

6

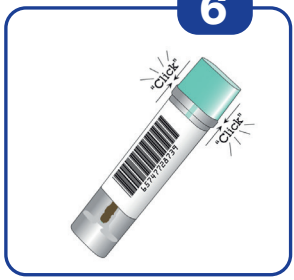

Teststab in das Proberöhrchen stecken und dieses mit einem hörbaren „Klick" verschließen. Vorgang nicht wiederholen.

7

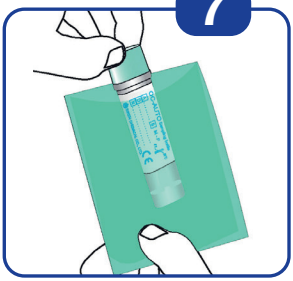

Proberöhrchen kräftig schütteln, in die grüne Tüte stecken und bei Ihrem Arzt (ausgebender Stelle) abgeben.

8

- ✓ Proberöhrchen ist beschriftet
- ✓ Proberöhrchen ist in grüner Tüte
- ✓ Umgehende Rückgabe bei Ihrem Arzt

Bitte kontrollieren!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt / Ihre behandelnde Ärztin.